



vivatone™

İŞİTME SİSTEMLERİ



Simply Sounds Better

ESTETİK, KALİTE ve DOĞALLIK

Entre İLE KANAL İÇİ TEKNOLOJİSİNDE GELECEK NESİLİ YAKALAYIN BEŞ MODEL İLE SEÇİLMEMEYE HAZIR

Gelişmiş Güçlü Fitting Sistem.

- Yeni gelişmiş dijital işlemci, (50 dB ila 70 dB arası 500 Hz - 1000 Hz ve 80 dB ila 90 dB arası 2000 Hz - 4000 Hz.)

Beş Modeliyle İhtiyaç Duyduğunuz Çeşitliliği Sağlar.

- AGC-O'yu WDRC Compression ile sınırlandıran Multi Kanal Sistemi
 - Hassas ses tonu ayarı için 12 band
 - Programlanabilir 4 hafıza modülü

Yeni Jenerasyon Dinamik Gürültü Önleme.

- Dinamik gürültü önleme sistemi, anlaşılması zor ve gürültülü ortamlarda konuşma anlaşılabilirliğini sağlar. Sofistike multi-mod sistemi desteğinde, konuşma ve müzik gibi istenen seslerin kaybolmaması için, rahatsız eden ani ses yükselmelerini ve geri plan gürültüsünü arındırarak temizler. Bu da gürültülü ortamlarda konuşma anlaşılabilirliğini yükseltir.

Tam Programlanabilen Ekstra güçlendirilmiş T-COIL Sistemi

- Telefon kullanımında en iyi performansı sağlar. Cep ve kablosuz telefon konuşmalarına uyumludur.
- Sofistike multi-mod belirleme sistemi, gelen ses şiddetini ve frekansını belirleyerek, geri plan gürültüsünden konuşma ya da müzik gibi istenen sesleri ayırır. Multi-Mod Sistemi gürültünün yoğun olduğu durumlarda konuşmaları daha iyi anlamayı sağlar.
- Uyarlanabilir otomatik feedback (geri bildirim işlemcisi) sürekli olarak frekans tepkisini ve gerekli olan ses kazanımını verebilmek için izler. Feedback yapabilecek durumlarda benzeri sistem kullanan diğer işitme cihazlarının aksine yüksek frekans kazancını düşürmeden ve pil süresini etkilemeden anında müdahale eder. Ek olarak, istenmeyen arka gürültülerin ve başka tonal seslerin konuşma sesleriyle karışmamasını sağlar. Bu durum geribildirimden önce işitme mesafesini genişleterek daha fazla verim alınmasını sağlar (3 - 5 db).

HASTA YARARI



VIVATONE TEKNOLOJİSİ NASIL YARAR SAĞLAR ?

· Vivatone yankıyı ortadan kaldırır.

Vivatone teknolojisi kulak kanalını açık bırakarak kulağınızın tıkanmasını önler. Bu da diğer kanal içi ve kulak içi işitme cihazlarına göre boş odada konuşma hissini, yani yankılanmayı ortadan kaldırır.

· Vivatone'da kulak tıkanmaz.

Vivatone kulağı doldurmadığından dolayı alçak frekansları yükselme gereği duymaz ve bu da kullanıcının gereksiz arka plan gürültüsünden rahatsız olmamasını sağlar.

· Vivatone zor ortamlarda esnek ve konforludur.

Vivatone'un kişiye özel programlanabilir 2 ya da 4 hafıza modülü ve çift yönlü mikrofonu, hastanın

değişik ve zor ortamlarda oldukça doğal ve temiz ses dinlemesine olanak tanır.

· Vivatone üstün konforu ve kendine has estetiği ile emsalsizdir.

Açık kanal tasarımı "TOC" kanal içi cihazlara göre tıkanıklık hissini ortadan kaldırır. Hemen hemen kulakta farkedilmez. Kulaktaki varlığını unutturacak şekilde hafif ve kullanımı kolay dizayn edilmiştir.

· Vivatone'da görünüm ve ses berraklığı.


Vivatone kulak kanalında oldukça doğal durur. Bu doğal görünüm kulak kanalında duran hoparlör vasıtasıyla mükemmel bir ses berraklığına dönüşür.

VIVATONE'U EŞSİZ KILAN NEDİR ?

ESKİ İŞİTME CİHAZINIZDA OLUŞAN PROBLEMLERİ SİZE TEKRAR YAŞATMAMAK



Heyecan veren yeni Vivatone ENTRE çizgisi dijital duyma aletlerinde yeni bir tasarımı, zarıflığı ve estetiği başarmıştır. Rahatsız etmeyen görünümü ve sesin berraklığı Vivatone'u eşsiz kılmıştır. Doğrudan kalıpsız olarak kulağa yerleştirilen mini hoparlör (TOC) eşsiz performans, doğallık ve estetik sağlamıştır. Hoparlör ile cihazı hemen hemen görünmeyen şeffaf bir tel ile birbirine bağlayarak sesin doğallığının kaybolmasını engellemiştir.

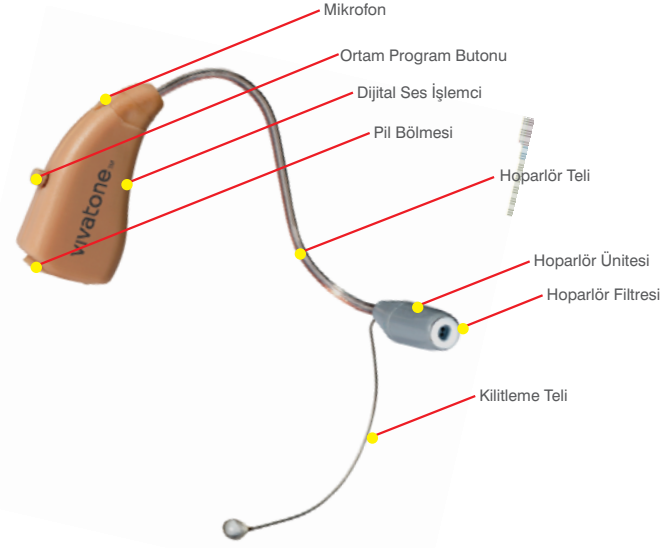

MUAYENEHANEDE YARARLARI



VIVATONE TEKNOLOJİSİ HASTALARA NE TÜRLÜ YARAR SAĞLAR ?

Vivatone Kolay, Çabuk Montaj (Takma)

Takması kolay olan Vivatone cihazları neredeyse kullanıma anında hazır. Hastalarınız anında memnun olacaklar ve siz de bir daha "bana güvenin, çok iyi olacak" demek zorunda kalmayacaksınız!

Vivatone Kulak Kalıbı İhtiyacını Yok Ediyor

Vivatone TOC mimarisinin maliyetli, zaman alan kulak kalıbına ihtiyacı yoktur. Vivatone, hastanın yatırımı hakkında kararsızlığa düşmesine sebep olabilecek vakit kaybını ortadan kaldırıyor ve işlemi basitleştiriyor.

Muayenehane Hizmetinde Yükseltme ...

Vivatone Müşterileriyle Ortak

Vivatone muayenehanelerindeki hizmetleri geliştirmek amacıyla müşterileriyle birlikte çalışıyor. Firma sizin ihtiyaçlarınız ve bölgenize göre pazarlama programlarını özelleştiriyor. Vivatone müşterilerini ortak olarak görüyor ve yenilikçi programları ve sizler için hazırlık ve uygulamalarda profesyonel uzmanlık sunuyor.


Vivatone Parçaları Ofiste Değişebilir

İleri seviyede ancak basit olan Vivatone tasarımı çabuk ve kolay ofis içi servis sunuyor. Anında çözüm sunarak hastalarınızın memnuniyetini garantileyin.



vivatone™
Entre™

Expanded Fitting Range *

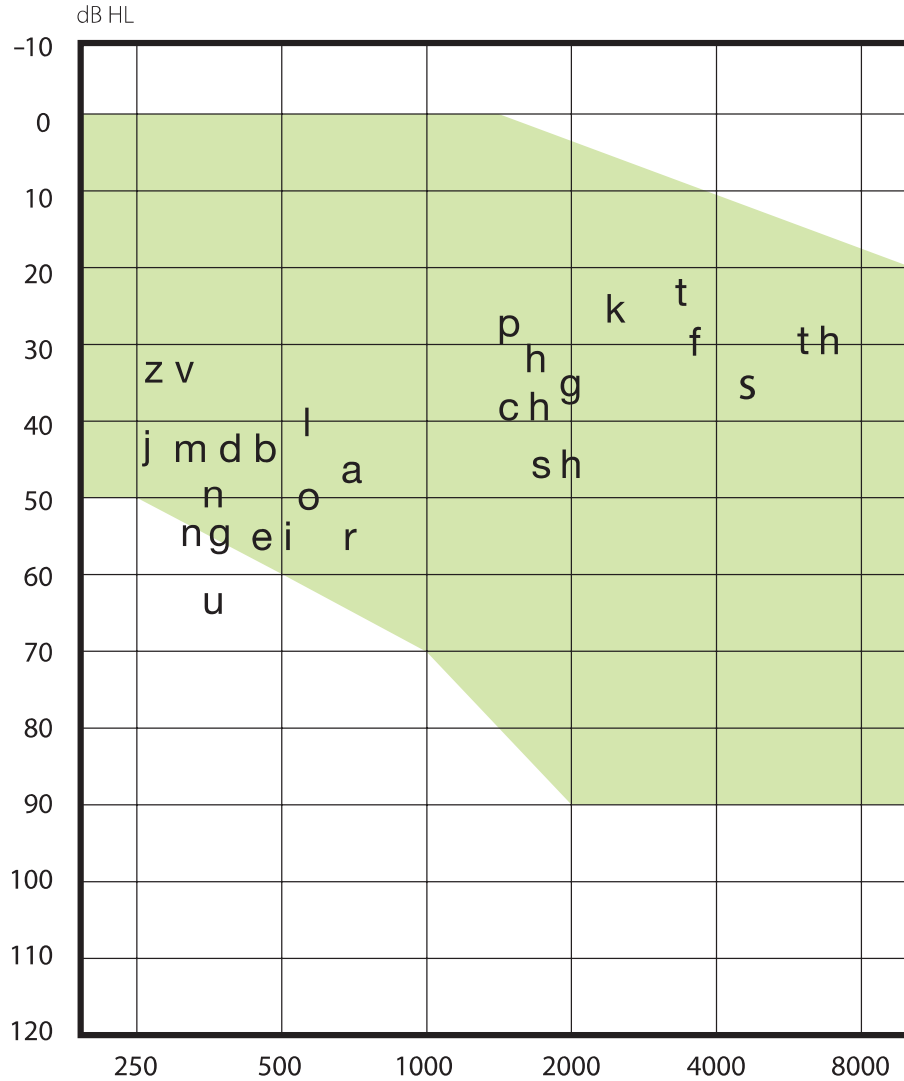

* Representative of data on file

vivatone® İşitme Cihazlarının Türkiye Distribütörü



DUYSES İŞİTME ve TIBBİ CİHAZLAR LTD. ŞTİ.



Ankara Merkez

Mithatpaşa Cad. No:47/8 Kat: 4 06420 Kızılay / ANKARA • Tel: (0 312) 430 28 00 • Faks: (0 312) 434 07 00

İzmir Şube

Alsancak Mah. Ali Çetinkaya Bulv. No: 37/4 Alsancak/İZMİR • Tel: (0 232) 463 28 32 • Faks: (0 232) 463 28 24

info@duyses.com.tr • www.duyses.com.tr